

29 cm

2 cm

5,5 cm

2 cm

10 cm

2 cm

5,5 cm

2 cm

Manufacturer: 
Medoffice Saglik Endustri Anonim Sirketi
Yazibasi Mah. Kuşçu Cad. No: 9/1-1 Torbalı / İzmir - TÜRKİYE
Tel: +90 232 431 31 12 Fax: +90 232 431 31 09
Mail: info@medoffice.com.tr
Web: www.medoffice.com.tr

Chemical Ingredients:
Aqua, Dimethicone(%3), Linoleamidopropyl Pg-D Chloride Phosphate (Phospholipid), Lauryl Glucoside, D-Panthenol (Provitamine B5), Allantoin, Aloe Berbadensis Extract, Polysorbate20, Tetrasodium EDTA, Citric Acid, Tocopheryl Acetate (Vitamine E), Chlorhexidine Digluconate, Glycerin, Chamomile Recutita Flower Extract, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate



8 683148 052333

Ref: MCP0025

MD

LOT

KEEP DRY

KEEP AWAY FROM SUNLIGHT

DO NOT REUSE

Turkey
Discover the potential
MADE IN TÜRKİYE
صناعة تركية

MEDI CARE

BARRIER CREAM PERINEAL WIPE

مناديل تنظيف المنطقة الحساسة

Nourishes the skin with Vitamin E
يحتوي على فيتامين إي للعناية بالبشرة

Latex, Lanolin, Alcohol free
مطاط، لانولين، بدون مادة الكحول

Cleans, Soften and Soothes
تنظيف، نعومة وسهولة

Contains Aloe Vera
يحتوي على مادة الألوفيرا

Refresh the Skin with Camomila Extract
خلاصة البابونج تقوم بتجديد خلايا

Barrier Effect
عديم الرائحة

25 PCS

pH: 5,5

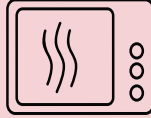
CE ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 ISO 14001

Instructions for Use:
Perineal Area Cleansing Wipes provide cleansing, care and safe effect for the bedridden and intensive care unit patients perineal area. Please wear rubber gloves to avoid contact with the body fluids before use. Open the package from "open here" part on the label. Apply gently because of the sensitivity of the perineal region. Please use a separate wipes for each body area. No need extra water, rinse and other cleaning products. The material used is medical waste. Dispose according to Medical Devices regulations.

Cautions and First Aid :
• Do not use damaged packaging products
• Product is cleaning and care products
• Do not use this product on wounds as a buffer
• Do not reuse the used products.
• Do not use this products for babies from age 0-6 months .
• Breastfeeding or pregnant women must be used under doctors supervision
• Do not use any cleaning material after and before using this product
• Avoid to contact with eyes. If still contacted, wash the eyes with plenty of water

منديل ميلل كوفل لتنظيف المنطقة الحساسة توفر التنظيف والعناية الآمنة للمرضى المزمين للفراش ومرضى العناية المركزة ونزوي الاحتياجات الخاصة والغير قادرين على الاستحمام
ينصح بلبس قفازات قبل البدء بتنظيف المريض
افتح العبوة من الأعلى ، قم بسحب منشفة واحدة ، وقم بمسحها على الجزء المراد تنظيفه بشكل لطيف مراعاة للمنطقة الحساسة
يجب استخدام منشفة واحدة لكل منطقة من الجسم
لا تحتاج لإضافة ماء أو شطف أو إضافة أي مادة منظفة
يجب التخلص من المنتج بعد الانتهاء من التنظيف واعتباره كفايات طبية محاذير الاستخدام
• لا تقم باستخدام العبوات التالفة
• هذا المنتجات يستخدم للتنظيف والعناية بالجسم
• لا تقم باستخدام هذا المنتج على الجروح
• لا يستخدم من قبل الأطفال سنس الولادة إلى عمر ٦ اشهر
• لا يستخدم من قبل النساء الحوامل والمرضعات قبل استشارة الطبيب
• لا تقم باستخدام أي منظف بعد استخدام هذا المنتج
• يجب عدم ملاسة المنتج للعين ، وفي حالة ملاسته يجب غسل العين بكمية كبيرة من الماء

Optional


MICROWAVE USE IF NEEDED.
Microwave Instructions for Use
1- Put the package in to Microwave.
2- Hold 20 seconds at 700W.
3- Check the temperature of wipes .
4- Do not use higher 35-40 °C

إرشادات استخدام المنتج داخل المايكرويف:
قم بوضع المنتج بالمايكرويف لمدة ٠٢ ثانية على ٠٠٧ واط
تأكد من درجة الحرارة، ولا تستخدم المنتج إذا كان بدرجة حرارة أكثر من ٥٢ °م